

HS-06 全自动均质仪





HS-06 全自动均质仪


通过机械剪切的方式, 将待处理样品充分破碎并与提取溶剂充分均一化, 可同时均质多达6个样品。仪器结构紧凑, 平行性好, 是实验室均质提取、细胞破碎、农产品检测、食品安全、药物分析、环保监测等领域的最佳选择。

应用领域



主要功能和特点

- 可同时快速均质6个样品,提高均质效率;
- 可自动完成上、下刀头操作,无需任何辅助工具,方便使用;
- 透明防护门有效降低噪声,便于观察,同时防止样品外溅;
- 多种规格试管架可选,多种规格刀头可选,轻松应对各种样品;
- 均质过程中,试管架可自动上下振荡,保证均质更充分。

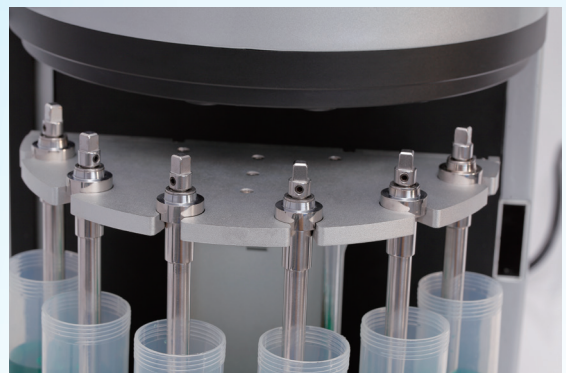

HS-06 技术参数

功率	1500W
刀头	316L不锈钢材质, 8mm、10mm和18mm等不同规格可选
转速	1800-25000rpm, 噪音 \leq 70dB
振荡频率	60次/min
样品管架	兼容5-180mL试管或离心管, 可选透明冰浴
触摸屏	5寸高清彩色触屏
工作温度/湿度	5°C~40°C/10~90%
工作电压	AC 220V \pm 10%, 50/60Hz

证券简称:海能技术 证券代码:430476

咨询热线:400 888 7840

官方网站: www.sineo.cn

服务监督电话:400 006 5188



官方微信



官方网站

上海新仪

地址:上海市徐汇区钦州北路1122号
92幢6层
电话:021 54487840
传真:021 64080840

新仪科学

地址:苏州工业园区金鸡湖大道99号
纳米城西北区9栋301
电话:0512 87163115
传真:0512 87163116

海能技术

地址:济南市经十路7000号汉峪金谷
A3-1栋4层
电话:0531 88874444
传真:0531 88874445

山东海能科学仪器

地址:山东省德州市临邑县花园大街
东段路南
电话:0531 88874444
传真:0531 88874445

郑州海能

地址:郑州市金水区东风东路18号
金城国际广场6号楼1单元1002室
电话:0371 55056876
传真:0371 55056879

南京海能

地址:江苏省南京市秦淮区中山东路
218号长安国际1405室
电话:025 85664446
传真:025 85624445

武汉海能

地址:武汉市洪山区珞狮路湖北农业
科技楼312号10楼
电话:027 87186861
传真:027 87186861

德国G.A.S.中国事业部

地址:北京市海淀区西三旗昌临
801号院1号楼1层
电话:010 82948200

悟空仪器

地址:北京市海淀区西三旗昌临
801号院1号楼1层
电话:010 82948200